

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัต

ผู้จัดทำ  ..... (นางพัชรี มาลา) ตำแหน่ง หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
--

ผู้ตรวจสอบ  ..... (นางพัชรี มาลา) ผู้จัดการคุณภาพ
---





โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 4 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชัด

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การเก็บสิ่งส่งตรวจถูกวิธี มีประสิทธิภาพ

### 2. หลักการ

สิ่งส่งตรวจ (ตัวอย่าง หรือ specimen) คือสิ่ง ที่นำมาทดลองทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีวิธีเก็บและการรักษาสภาพก่อนการ ตรวจ และจุดประสงค์ของการตรวจที่แตกต่างกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับ การเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดให้ถูกต้องการเก็บสิ่งส่งตรวจต้องใช้วิธีสะอาดปราศจากเชื้อ และเครื่องมือที่ใช้ต้องปราศจากเชื้อ และมีหลักในการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี

### 3. ข้อกำหนดของวิธีการ

-

### 4. ชนิดของสิ่งส่งตรวจ

สิ่งคัดหลั่งจากภายในอวัยวะสืบพันธุ์

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 5 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชัด

## 5. เครื่องมือและน้ำยา

### 5.1. เครื่องมือ

- 5.1.1. ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อ
- 5.1.2. หลอดแก้ว
- 5.1.3. Slideแก้ว
- 5.1.4. กระจกตาชกรอง

### 5.2. น้ำยา

- 5.2.1. NSS 0.9%
- 5.2.2. Alcohol 95 %


โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 6 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

## 6. ขั้นตอนปฏิบัติ

### การเก็บส่งตรวจห้อง PV

#### วิธีเก็บ Acid Phos

1. เขียนชื่อ.....สกุล.....HN.....  
รพ.บ่อทอง วันที่เก็บ.....
2. ไม้พันสำลีผ่านการนึ่ง (เบอร์ S) ป้ายสิ่งคัดหลังจากช่องคลอด  
ลงในวงกลมที่ดินสอวงไว้
3. รอให้แห้งพับกระดาษเป็นรูปกรวยใส่ของยาเขียนข้อความ  
แบบข้อ 1. ส่งห้อง Lab

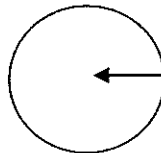


โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 7 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI - NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชัด

ในกรณีไม่มีกระดาษกรองให้ใช้ ไม้พันสำลีผ่านการนึ่ง (เบอร์ S) ป้ายสิ่งคัดหลังจากช่องคลอดแล้ว ตากให้แห้ง ใส่ถุงซิปล็อก เขียน วันที่ ชื่อ นามสกุล HN แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการ

#### การทำ KOH และ GRAM STAIN

ไม้พันสำลีผ่านการนึ่ง (เบอร์ S) ป้ายสิ่งคัดหลังจากช่องคลอด ป้ายบน Slide แบบสวยงาม 1 จุด กว้างๆ (ตามภาพ) ส่งห้อง Lab

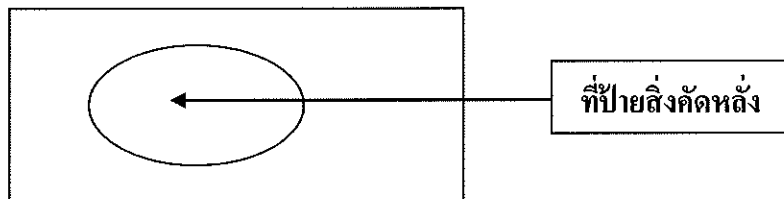

#### การทำ WET SMEAR

1. Tube สะอาด (เบิกจากห้อง Lab) ใส่ 0.9 % NSS 1 ml
2. ไม้พันสำลีเบอร์ S ผ่านการนึ่งป้ายสิ่งคัดหลังจากช่องคลอดใส่ลง Tube ข้อ1. ส่งห้อง Lab
3. เกณฑ์การตรวจสอบ  
สิ่งส่งตรวจไม่มีสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ  
สิ่งส่งตรวจถูกต้อง ถูกคน ไม่ต้องเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำ
4. ข้อควรระวัง

การเก็บสิ่งส่งตรวจต้องใช้วิธีสะอาดปราศจากเชื้อ และเครื่องมือที่ใช้ต้องปราศจากเชื้อ

โรงพยาบาลบ่อทอง งานผู้ป่วยนอก	หน้าที่ 8 จาก 8 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 19 มิถุนายน 2563
วิธีปฏิบัติที่ : WI – NUR - OPD - 014	
เรื่อง : การเก็บสิ่งส่งตรวจ	
ผู้จัดทำ : นางพัชรี มาลา	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

## 7. การควบคุมคุณภาพ

- 8.1. สำลีผ่านการsterile
- 8.2. น้ำยาไม่หมดอายุ
- 8.3. อุปกรณ์ผ่านการทำความสะอาดปราศจากเชื้อ โดยดูผลจากกระดาษ Test ในท่ออุปกรณ์

## 8. การรายงานผล

ติดตามผลที่ห้องปฏิบัติการ

## 9. คำอ้างอิง

-

## 10. ข้อจำกัด

- 11.1. ไม่สามารถทำในเด็ก
- 11.2. กรณี case เด็กเล็กที่ไม่สามารถใส่เครื่องมือตรวจภายในได้

## 11. ความปลอดภัย

- 12.1. สถานที่มิดชิด เป็นสัดส่วน ไม่เปิดเผยผู้ป่วย
- 12.2. เครื่องมือ speculum ไม่ชำรุดสามารถพร้อมใช้งาน
- 12.3. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ทุกครั้ง ก่อนตรวจ
- 12.4. ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด
- 12.5. ขณะปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือและเสื้อคลุมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ
- 12.6. ถ้าตัวอย่างหก ต้องเช็ดทำความสะอาดด้วย 70% Alcohol หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
- 12.7. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเสร็จจากการปฏิบัติงาน

## 12. เอกสารอ้างอิง

-